

RedVital VitaSpot 12w



Pero pro terapii červeným světlem

NÁVOD K POUŽITÍ

Parametry výrobku

Rozměry (cm)	12,7*2,9
Množství LED:	5
Počet vlnových délek:	5
Vlnové délky (nm):	460, 630, 660, 850, 900
Výkon (W):	12
Záruční doba:	3 roky
Úhel svícení:	12°
Intenzita:	133 mW/cm ² při 15 cm vzdálenosti
EMF:	0μT při 15 cm vzdálenosti
Typ baterie:	18650 2000mAh 3,7V
Životnost:	>50 000 hodin
Hmotnost:	235 g
Materiál:	nerez
Certifikace:	CE, ROHS, FCC

Obsah balení: svítidla VitaSpot 12w, ochranné brýle, nabíječka baterií, baterie 2ks

⚠ *Terapie červeným světlem je bezpečná, ale je vhodné ji přizpůsobit individuálním potřebám a zdravotnímu stavu. Pokud máte specifické problémy s imunitním systémem, konzultujte je se svým lékařem. Zařízení nejsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky. Veškeré informace neslouží pro vzdělávací účely a nejsou určeny pro léčby nebo prevenci jakéhokoli onemocnění. Uvedené informace nenahrazují odbornou lékařskou radu a neposkytují lékařská doporučení.*


Instalace baterie

Odšroubujte spodní část a vložte dodanou baterii do bateriového prostoru. Poté zašroubujte zpět.

+Kladný pól směrem nahoru

-Záporný pól směrem dolů

Používejte pouze baterie typu 18650.

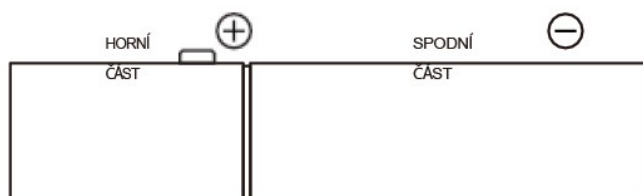

Výběr vlnových délek (zmáčněte pro změnu):

1. zapnutí všech pěti světelných zdrojů;
2. pět světelných zdrojů - 10 HZ pulzní blikání;
3. červená 630 + 660 nm;
4. červená 630 + 660 nm - 10 HZ pulzní blikání;
5. infračervené 850 + 900 nm;
6. infračervené 850 + 900 nm - 10 HZ pulzní blikání;
7. modré světlo 460 °C jasná;
8. modré světlo 460 °C jasná - 10 HZ pulzní blikání;
9. vypnutí;

Zařízení používá kombinaci 5 vlnových délek: červené(630 nm, 660 nm), infračervené (850 nm, 900 nm) a modré (460 nm), které byly vybrány tak, aby poskytovaly ideální intenzitu světla pro biologické účinky kdekoli na těle. Kdykoliv ho potřebujete, je připraveno. Lehké. Tiché. Nabíjecí.



Rozsahy vlnových délek (ve světelné terapii)



⚠ Jak používat zařízení:

1. Příprava pokožky: Pokožka musí být čistá, suchá a bez jakýchkoli kosmetických přípravků (make-up, krémy atp.).
2. Ochrana zraku: Nikdy se nedívejte přímo do zapnutých LED. Používejte přiložené ochranné brýle.
3. Vzdálenost: Světlo aplikujte na tělo ve vzdálenosti 5–30 cm.
4. Doba trvání: Vystavte každou oblast světlu po dobu 10–30 minut, v závislosti na vzdálenosti. Podle potřeby opakujte na dalších oblastech. Po 5 minutách se přístroj vypne, nechte ho odpočinout a poté pokračujte.
5. Frekvence používání: Provádějte 3 až 5krát týdně, dokud neucítíte výsledky.

⚠⚠ Kontraindikace – Kdy terapii NEpoužívat ⚠⚠

Děti mohou používat zařízení pouze pod dohledem dospělých.

⚠ **Vždy se poradte se svým lékařem!** Zařízení **nepoužívejte**, pokud spadáte do některé z těchto kategorií, nebo se léčíte na jiné závažnější onemocnění:

- **Aktivní onkologické onemocnění:** Nepoužívejte panel v oblasti aktivního nádoru, pokud tak výslovně nedoporučí váš onkolog.
- **Těhotenství:** Terapie se nedoporučuje během těhotenství, zejména v oblasti břicha.
- **Fotosenzitivita:** Pokud trpíte stavem, který způsobuje přecitlivělost na světlo (např. některé formy lupusu), terapii se vyhněte.

- Nedávné použití fotosenzitivních látek:** Pokud jste v posledních 24–48 hodinách aplikovali na kůži látky zvyšující citlivost (např. retinoidy, kyselinu glykolovou, některé éterické oleje) nebo užíváte fotosenzitivní léky (některá antibiotika, diuretika), terapii vynechte.
- Závažné onemocnění očí nebo sítnice:** Při těchto stavech je nutná konzultace s očním lékařem před zahájením terapie v obličejí.
- Akutní horečka nebo infekce:** Terapii neprovádějte, pokud máte horečku nebo akutní infekční onemocnění.
- Pokud užíváte léky na předpis.**

Bezpečnostní pokyny k užívání LED zařízení pro terapii červeným světlem

⚠ Elektrická bezpečnost – Nejvyšší priorita ⚠

- Zdroj napájení:** Výhradně používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný výrobcem. Použití nekompatibilního adaptéru (nesprávného napětí, proudu nebo polarity) může zařízení nevratně poškodit a způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Kontrola kabelů a adaptéru:** Před každým použitím vizuálně zkontrolujte napájecí kabel a adaptér. Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část kabelu poškozena (prasklá izolace, roztřepené vodiče, deformovaná zástrčka) nebo pokud se adaptér přehřívá, zapáchá nebo vydává neobvyklé zvuky.
- Umístění:** Zařízení je určeno výhradně pro suché prostory a vnitřní použití. Chraňte jej před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami. Nedávejte na zařízení žádné nádoby s kapalinami. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vysoce hořlavých materiálů.
- Vedení kabelů:** Kabel nepokládejte na podlahy, kde hrozí poškození. Ani jej neved'te v dosahu dětí nebo domácích zvířat. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Přetížení:** Nepřipojujte adaptér k přetížené elektrické zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu.
- Neponechávejte bez dozoru:** Během používání nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru, zvláště pokud jsou v blízkosti dětí nebo domácí zvířata.

⚠ Údržba, skladování a likvidace

- Údržba a čištění:** Panel vždy čistěte pouze mírně vlhkým, jemným hadříkem. Před čištěním vždy zařízení odpojte od elektrické sítě! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abyste nepoškodili LED diody.
- Skladování:** Přístroj skladujte na suchém, chladném a nedostupném místě pro děti. Při dlouhodobém uskladnění jej zabalte do původního obalu.

⚠ Likvidace zařízení (dle předpisů WEEE)

- Toto zařízení podléhá specifickým pravidlům pro recyklaci elektroodpadu.
- Nevyhazujte jej do komunálního odpadu!
- Vyřazené elektrické zařízení odevzdejte na místním sběrném dvoře nebo v obchodě s elektronikou, kde mají povinnost jej zpětně odebrat.
- Správná likvidace chrání životní prostředí před škodlivými látkami a umožňuje recyklaci cenných surovin. Informace o nejbližším místě zpětného odběru vám poskytne vaše obec nebo městský úřad.
- Ekologická likvidace je zajištěna prostřednictvím systému Asekol a.s. Sběrná místa naleznete na www.asekol.cz/sberna-mista

⚠ Reklamace a záruka

Veškeré informace naleznete na shop.redvital.cz/reklamace