

RedVital VitaSpot 9w



Pero pro terapii červeným světlem

NÁVOD K POUŽITÍ

Parametry výrobku

Rozměry (cm)	12,5*2,5
Množství LED:	3
Počet vlnových délek:	3
Vlnové délky (nm):	630, 660, 850
Výkon (W):	9
Záruční doba:	3 roky
Úhel svícení:	12°
Intenzita:	133 mW/cm² při 15 cm vzdálenosti
EMF:	0μT při 15 cm vzdálenosti
Typ baterie:	18650 2000mAh 3,7V
Životnost:	>50 000 hodin
Hmotnost:	200 g
Materiál:	nerez
Certifikace:	CE, ROHS, FCC

Obsah balení: svítidla VitaSpot 9w, ochranné brýle, nabíječka baterií, baterie 2ks

⚠ Terapie červeným světlem je bezpečná, ale je vhodné ji přizpůsobit individuálním potřebám a zdravotnímu stavu. Pokud máte specifické problémy s imunitním systémem, konzultujte je se svým lékařem. Zařízení nejsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky. Veškeré informace neslouží pro vzdělávací účely a nejsou určeny pro léčby nebo prevenci jakéhokoli onemocnění. Uvedené informace nenahrazují odbornou lékařskou radu a neposkytují lékařská doporučení.


Instalace baterie

Odšroubujte spodní část a vložte dodanou baterii do bateriového prostoru. Poté zašroubujte zpět.

+Kladný pól směrem nahoru

-Záporný pól směrem dolů

Používejte pouze baterie typu 18650.

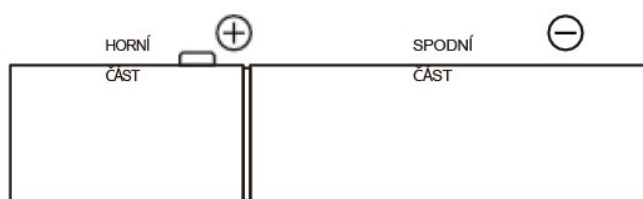

Dopřejte svému tělu

jemný dotek červeného světla.

Toto přenosné pero s červeným a blízkým infračerveným světlem je tu pro chvíle, kdy potřebujete ulevit napětí, podpořit regeneraci a jste i mimo domov.

Světlo se 3 vlnovými délkami a výkonem 9 W působí jak na povrchu pokožky, tak i v hlubších vrstvách tkání, kde pomáhá obnovovat, uvolňovat a regenerovat. Stačí pár minut denně a můžete cítit rozdíl – v pohodlí domova, v kanceláři i na cestách.

Kdykoliv ho potřebujete, je připraveno. Lehké. Tiché. Nabíjecí.

Zařízení používá kombinaci červených LED diod 630 nm, 660 nm a infračervených LED diod 850 nm, které byly vybrány tak, aby poskytovaly ideální intenzitu světla pro biologické účinky kdekoli na těle.



⚠ Jak používat zařízení:

1. Příprava pokožky: Pokožka musí být čistá, suchá a bez jakýchkoli kosmetických přípravků (make-up, krémy atp.).
2. Ochrana zraku: Nikdy se nedívejte přímo do zapnutých LED diod. Používejte přiložené ochranné brýle.
3. Vzdálenost: Světlo aplikujte na tělo ve vzdálenosti 5–30 cm.
4. Doba trvání: Vystavte každou oblast světlu po dobu 10–30 minut, v závislosti na vzdálenosti. Podle potřeby opakujte na dalších oblastech. Po 5 minutách se přístroj vypne, nechte ho odpočinout a poté pokračujte.
5. Frekvence používání: Provádějte 3 až 5krát týdně, dokud neucítíte výsledky.

⚠⚠ Kontraindikace – Kdy terapii NEpoužívat ⚠⚠

Děti mohou používat zařízení pouze pod dohledem dospělých.

⚠ **Vždy se poraďte se svým lékařem!** Zařízení **nepoužívejte**, pokud spadáte do některé z těchto kategorií, nebo se léčíte na jiné závažnější onemocnění:

- **Aktivní onkologické onemocnění:** Nepoužívejte panel v oblasti aktivního nádoru, pokud tak výslovně nedoporučí váš onkolog.
- **Těhotenství:** Terapie se nedoporučuje během těhotenství, zejména v oblasti břicha.
- **Fotosenzitivita:** Pokud trpíte stavem, který způsobuje přecitlivělost na světlo (např. některé formy lupusu), terapii se vyhněte.
- **Nedávné použití fotosenzitivních látek:** Pokud jste v posledních 24–48 hodinách aplikovali na kůži látky zvyšující citlivost (např. retinoidy, kyselinu glykolovou, některé éterické oleje) nebo užíváte fotosenzitivní léky (některá antibiotika, diuretika), terapii vynechte.
- **Závažné onemocnění očí nebo sítnice:** Při těchto stavech je nutná konzultace s očním lékařem před zahájením terapie v obličeji.
- **Akutní horečka nebo infekce:** Terapii neprovádějte, pokud máte horečku nebo akutní infekční onemocnění.
- **Pokud užíváte léky na předpis.**

Bezpečnostní pokyny k užívání LED zařízení pro terapii červeným světlem

Elektrická bezpečnost – Nejvyšší priorita

- **Zdroj napájení:** Výhradně používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný výrobcem. Použití nekompatibilního adaptéru (nesprávného napětí, proudu nebo polarity) může zařízení nevratně poškodit a způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- **Kontrola kabelů a adaptéru:** Před každým použitím vizuálně zkontrolujte napájecí kabel a adaptér. Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část kabelu poškozena (prasklá izolace, roztřepené vodiče, deformovaná zástrčka) nebo pokud se adaptér přehřívá, zapáchá nebo vydává neobvyklé zvuky.
- **Umístění:** Zařízení je určeno výhradně pro suché prostory a vnitřní použití. Chraňte jej před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami. Nedávejte na zařízení žádné nádoby s kapalinami. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vysoce hořlavých materiálů.
- **Vedení kabelů:** Kabel nepokládejte na podlahy, kde hrozí poškození. Ani jej neved'te v dosahu dětí nebo domácích zvířat. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- **Přetížení:** Nepřipojujte adaptér k přetížené elektrické zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu.
- **Neponechávejte bez dozoru:** Během používání nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru, zvláště pokud jsou v blízkosti děti nebo domácí zvířata.

Údržba, skladování a likvidace

- **Údržba a čištění:** Panel vždy čistěte pouze mírně vlhkým, jemným hadříkem. Před čištěním vždy zařízení odpojte od elektrické sítě! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abyste nepoškodili LED diody.
- **Skladování:** Přístroj skladujte na suchém, chladném a nedostupném místě pro děti. Při dlouhodobém uskladnění jej zabalte do původního obalu.

Likvidace zařízení (dle předpisů WEEE)

- Toto zařízení podléhá specifickým pravidlům pro recyklaci elektroodpadu.
- Nevyhazujte jej do komunálního odpadu!
- Vyřazené elektrické zařízení odevzdejte na místním sběrném dvoře nebo v obchodě s elektronikou, kde mají povinnost jej zpětně odebrat.
- Správná likvidace chrání životní prostředí před škodlivými látkami a umožňuje recyklaci cenných surovin. Informace o nejbližším místě zpětného odběru vám poskytne vaše obec nebo městský úřad.
- Ekologická likvidace je zajištěna prostřednictvím systému Asekol a.s. Sběrná místa naleznete na www.asekol.cz/sberna-mista

Reklamace a záruka

Veškeré informace naleznete na shop.redvital.cz/reklamace