

RedVital VitaMask 1.0



Obličejová maska pro terapii červeným světlem


NÁVOD K POUŽITÍ

Parametry výrobku


Rozměry (cm)	30*20*0,5 cm
Množství LED:	240
Počet vlnových délek:	4
Vlnové délky (nm):	460, 590, 630, 850
Výkon (W):	3
Flicker:	no flicker
Úhel svícení:	360°
Intenzita:	35 mW/cm ² při 15 cm vzdálenosti
EMF:	0μT při 15 cm vzdálenosti
Baterie:	5V DC 3000 mAh
Časovač:	10, 15, 20, 25, 30 minut
Záruční doba:	3 roky
Životnost:	>50 000 hodin
Hmotnost:	320 g
Materiál:	Plast, silikon
Certifikace:	CE, ROHS, FCC

Obsah balení: obličejová maska VitaMask 1.0, napájecí kabel USB (bez zdroje), ovládač, 2 krytky očí, popruh k uchycení

⚠ Terapie červeným světlem je bezpečná, ale je vhodné ji přizpůsobit individuálním potřebám a zdravotnímu stavu. Pokud máte specifické problémy s imunitním systémem, konzultujte je se svým lékařem. Zařízení nejsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky. Veškeré informace neslouží pro vzdělávací účely a nejsou určeny pro léčby nebo prevenci jakéhokoli onemocnění. Uvedené informace nenahrazují odbornou lékařskou radu a neposkytují lékařská doporučení.

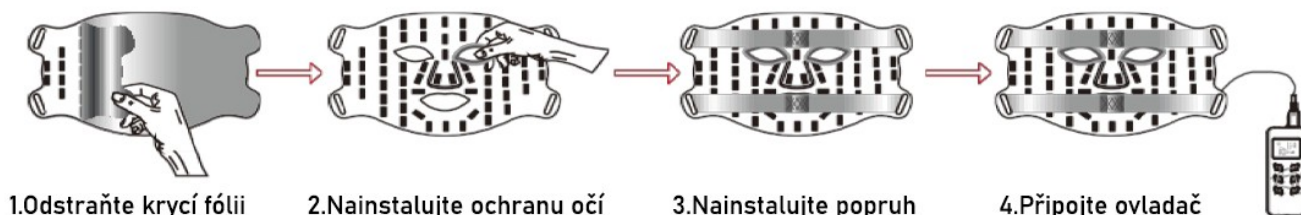

Ovladač

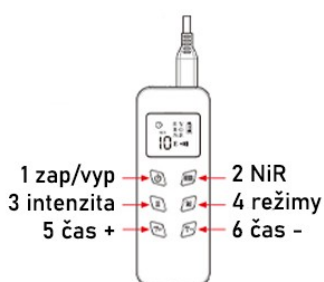

Nastavení:

1. Tlačítko zapnutí: Dlouhým stisknutím po dobu 1–2 sekundy přepnete do stavu zapnuto/vypnuto.
2. Tlačítko nezávislého ovládání infračerveného světla: zapnutí/vypnutí infračerveného světla, lze použít s jakýmkoli světlem.
3. Tlačítko E: nastavení intenzity, krátkým stisknutím nastavíte 3 stupně.
4. Tlačítko M: konverze světelného zdroje, 3 režimy světelného zdroje.
5. Tlačítko prodloužení doby: stisknutím tlačítka T+ prodloužíte dobu.
6. Tlačítko zkrácení doby: stisknutím tlačítka T- zkrátíte dobu svícení. Doba zapnutí má 5 stupňů (10/15/20/25/30 min).

Co jsou vlnové délky a proč na nich záleží

460 nm (modré světlo) – zklidňuje pleť, působí antibakteriálně a pomáhá udržet čistotu pleti. **590 nm (žluté světlo)** – rozjasňuje, sjednocuje tón pleti a podporuje přirozenou vitalitu. **630 nm (červené světlo)** – stimuluje tvorbu kolagenu, regeneraci buněk a napomáhá hojení. **850 nm (NIR, blízké infračervené světlo)** – proniká do hlubších vrstev, podporuje prokrvení, uvolňuje napětí a přináší pocit klidu.

Rozsahy vlnových délek (ve světelné terapii)



⚠ Jak používat zařízení:

1. Příprava pokožky: Pokožka musí být čistá, suchá a bez jakýchkoli kosmetických přípravků (make-up, krémy atp.).
2. Ochrana zraku: Nikdy se nedívejte přímo do zapnutých LED diod. Používejte přiložené krytky očí.
3. Doba trvání: Používejte po dobu 5–30 minut. Začněte v krátkých intervalech a zvyšujete až do 30 minut, pokud se neobjeví nepříjemné příznaky (např. na silikonový materiál)
4. Frekvence používání: Provádějte 3 až 5krát týdně.

⚠⚠ Kontraindikace – Kdy terapii NEpoužívat ⚠⚠

Děti mohou používat zařízení pouze pod dohledem dospělých.

⚠ Vždy se porad'te se svým lékařem! Zařízení nepoužívejte, pokud spadáte do některé z těchto kategorií, nebo se léčíte na jiné závažnější onemocnění:

- **Aktivní onkologické onemocnění:** Nepoužívejte panel v oblasti aktivního nádoru, pokud tak výslovně nedoporučí váš onkolog.
- **Těhotenství:** Terapie se nedoporučuje během těhotenství, zejména v oblasti břicha.
- **Fotosenzitivita:** Pokud trpíte stavem, který způsobuje přecitlivělost na světlo (např. některé formy lupusu), terapii se vyhněte.
- **Nedávné použití fotosenzitivních látek:** Pokud jste v posledních 24–48 hodinách aplikovali na kůži látky zvyšující citlivost (např. retinoidy, kyselinu glykolovou, některé éterické oleje) nebo užíváte fotosenzitivní léky (některá antibiotika, diuretika), terapii vynechte.
- **Závažné onemocnění očí nebo sítnice:** Při těchto stavech je nutná konzultace s očním lékařem před zahájením terapie v obličeji.
- **Akutní horečka nebo infekce:** Terapii neprovádějte, pokud máte horečku nebo akutní infekční onemocnění.
- **Pokud užíváte léky na předpis.**

Bezpečnostní pokyny k užívání LED zařízení pro terapii červeným světlem

⚠ Elektrická bezpečnost – Nejvyšší priorita ⚠

- **Zdroj napájení:** Výhradně používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný výrobcem. Použití nekompatibilního adaptéru (nesprávného napětí, proudu nebo polarity) může zařízení nevratně poškodit a způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- **Kontrola kabelů a adaptéru:** Před každým použitím vizuálně zkontrolujte napájecí kabel a adaptér. Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část kabelu poškozena (prasklá izolace, roztřepené vodiče, deformovaná zástrčka) nebo pokud se adaptér přehřívá, zapáchá nebo vydává neobvyklé zvuky.
- **Umístění:** Zařízení je určeno výhradně pro suché prostory a vnitřní použití. Chraňte jej před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami. Nedávejte na zařízení žádné nádoby s kapalinami. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vysoce hořlavých materiálů.
- **Vedení kabelů:** Kabel nepokládejte na podlahy, kde hrozí poškození. Ani jej neved'te v dosahu dětí nebo domácích zvířat. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- **Přetížení:** Nepřipojujte adaptér k přetížené elektrické zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu.
- **Neponechávejte bez dozoru:** Během používání nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru, zvláště pokud jsou v blízkosti děti nebo domácí zvířata.

⚠ Údržba, skladování a likvidace

- **Údržba a čištění:** Panel vždy čistěte pouze mírně vlhkým, jemným hadříkem. Před čištěním vždy zařízení odpojte od elektrické sítě! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abyste nepoškodili LED diody.
- **Skladování:** Přístroj skladujte na suchém, chladném a nedostupném místě pro děti. Při dlouhodobém uskladnění jej zabalte do původního obalu.

⚠ Likvidace zařízení (dle předpisů WEEE)

- Toto zařízení podléhá specifickým pravidlům pro recyklaci elektroodpadu.
- Nevyhazujte jej do komunálního odpadu!
- Vyřazené elektrické zařízení odevzdejte na místním sběrném dvoře nebo v obchodě s elektronikou, kde mají povinnost jej zpětně odebrat.
- Správná likvidace chrání životní prostředí před škodlivými látkami a umožňuje recyklaci cenných surovin. Informace o nejbližším místě zpětného odběru vám poskytne vaše obec nebo městský úřad.
- Ekologická likvidace je zajištěna prostřednictvím systému Asekol a.s. Sběrná místa naleznete na www.asekol.cz/sberna-mista

⚠ Reklamace a záruka

Veškeré informace naleznete na shop.redvital.cz/reklamace