


RedVital VitaCore 1.0

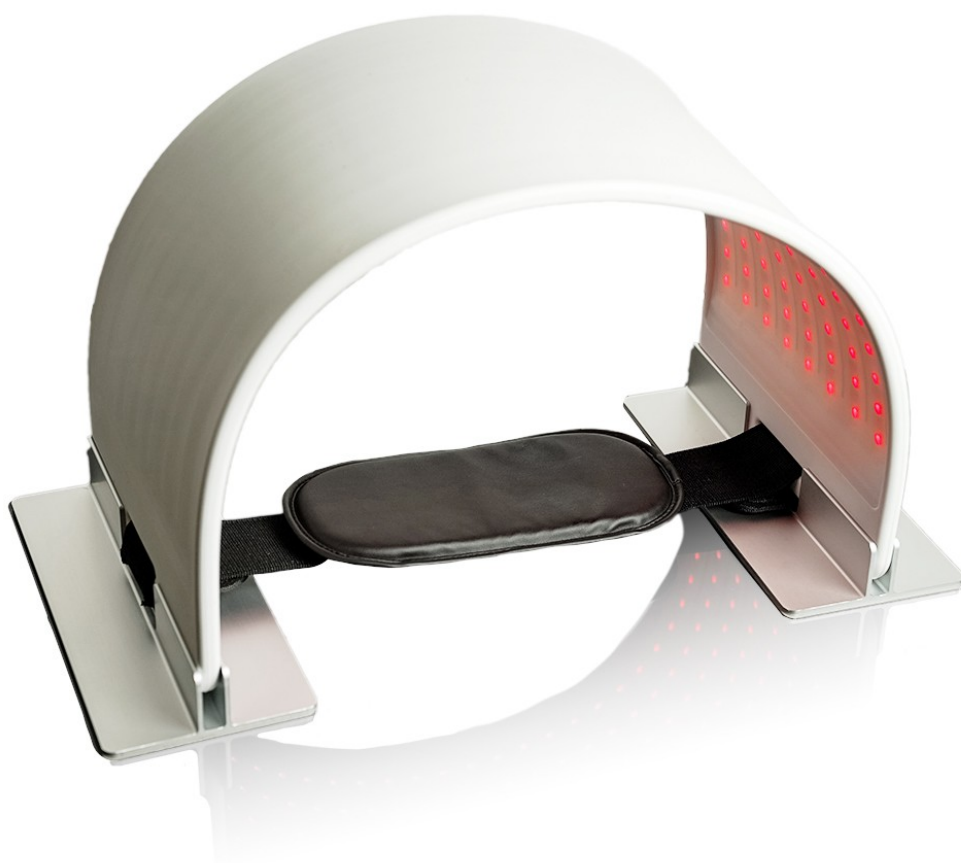

Multifunkční pás pro terapii červeným světlem

NÁVOD K POUŽITÍ

Parametry výrobku

Rozměry (cm)	64*23*1 cm
Množství LED:	240
Počet vlnových délek:	6+1
Vlnové délky (nm):	390, 470, 490, 525, 580, 630
Výkon (W):	4,2
Flicker:	no flicker
Úhel svícení:	30°
Intenzita:	70 mW/cm ² při 15 cm vzdálenosti
EMF:	0μT při 15 cm vzdálenosti
Baterie:	200mAh 3,7V
Časovač:	10, 15 minut
Záruční doba:	3 roky
Životnost:	>50 000 hodin
Hmotnost:	1,8 kg
Materiál:	Plast, EVA, TPU
Certifikace:	CE, ROHS, FCC

Obsah balení: pás VitaCore 1.0, dálkový ovladač, USB nabíjecí kabel, opěrka hlavy, brýle 1ks, popruhy 2ks, držák 2ks

⚠ Terapie červeným světlem je bezpečná, ale je vhodné ji přizpůsobit individuálním potřebám a zdravotnímu stavu. Pokud máte specifické problémy s imunitním systémem, konzultujte je se svým lékařem. Zařízení nejsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky. Veškeré informace neslouží pro vzdělávací účely a nejsou určeny pro léčby nebo prevenci jakéhokoli onemocnění. Uvedené informace nenahrazují odbornou lékařskou radu a neposkytují lékařská doporučení.



- zapnutí/vypnutí
- barva
- čas

Pro obličejovou část: provlékněte menší popruh otvorem v polštářku, poté na obou stranách zařízení. Zařízení zasuňte do stojanů. Doporučujeme používat tento produkt vleže na posteli, aby se uvolnilo celé tělo.

Pro jinou tělesnou oblast: omotejte zařízení přímo kolem požadované části a nastavte popruhy na správnou pevnost. Po použití zařízení důkladně vyčistěte mírně vlhkým hadříkem.

1. Dlouhým stiskem zapněte zařízení
2. Zvolte požadovaný barevný režim a poté dobu vypnutí 10 nebo 15 minut. **Doporučujeme 15–30 minut denně na jednu tělesnou oblast. Nedívejte se na světlo příliš dlouho, používejte ochranné brýle.**

Rozměry zařízení při užívání jsou:

- šířka základny: 23–31cm
- výška: 23–25cm

Toto zařízení využívá 7 různých zdrojů studeného světla, a to červené, modré, zelené, žluté, fialové, cyanové a bílé. Přičemž každé světlo má jiné účinky a může řešit různé problémy pleti.

Červené světlo (630 nm): Může zlepšit buněčnou aktivitu, urychlit metabolismus a podpořit tvorbu kolagenu. Má bělící a zesvětlující účinky, omlazuje a vyhlazuje vrásky, zvyšuje pružnost pokožky, zlepšuje její stav, opravuje poškozenou pokožku, zmenšuje póry, působí proti stárnutí a oxidaci.

Modré světlo (470 nm): Má antibakteriální, protizánětlivé účinky, dokáže odstranit akné a vředy a nezanechává jizvy ani pigmentové skvrny.

Zelené světlo (525 nm): Může snížit sekreci kožního mazu, vyrovnat pokožku, účinně zmírnit stres, propláchnout lymfu a odvodnit otoky.

Žluté světlo (580 nm): Doplnuje energii kožním buňkám, rozkládá pigmenty, podporuje lymfatický odtok, zlepšuje drsnost a vrásky pokožky, léčí zarudnutí pokožky a posiluje imunitu.

Fialové světlo: Jedná se o duální frekvenční světlo červené a modré barvy. Kombinuje účinky dvou druhů fototerapie, zejména při léčbě akné a jizev po akné, a má zvláště dobrý regenerační účinek.

Cyanové světlo: Postupně zvyšuje energii buněk a má dobrý účinek na metabolismus.

Bílé světlo: Proniká do hlubokých vrstev pokožky, urychluje metabolismus pokožky, rozkládá pigmentové skvrny, zlepšuje jemné vrásky a povislou pokožku.

Rozsahy vlnových délek (ve světelné terapii)



⚠ Jak používat zařízení:

1. Příprava pokožky: Pokožka musí být čistá, suchá a bez jakýchkoli kosmetických přípravků (make-up, krémy atp.).
2. Ochrana zraku: Nikdy se nedívejte přímo do zapnutých LED diod. Používejte přiložené ochranné brýle.
3. Vzdálenost: Světlo aplikujte na tělo ve vzdálenosti 20–50 cm.
4. Doba trvání: Vystavte každou oblast světlu po dobu 5–30 minut, v závislosti na vzdálenosti. Podle potřeby opakujte na dalších oblastech.
5. Frekvence používání: Provádějte 3 až 5krát týdně, dokud neucítíte výsledky.

⚠⚠ Kontraindikace – Kdy terapii NEpoužívat ⚠⚠

Děti mohou používat zařízení pouze pod dohledem dospělých.

⚠ **Vždy se poradte se svým lékařem!** Zařízení **nepoužívejte**, pokud spadáte do některé z těchto kategorií, nebo se léčíte na jiné závažnější onemocnění:

- **Aktivní onkologické onemocnění:** Nepoužívejte panel v oblasti aktivního nádoru, pokud tak výslovně nedoporučí váš onkolog.
- **Těhotenství:** Terapie se nedoporučuje během těhotenství, zejména v oblasti břicha.
- **Fotosenzitivita:** Pokud trpíte stavem, který způsobuje přecitlivělost na světlo (např. některé formy lupusu), terapii se vyhněte.
- **Nedávné použití fotosenzitivních látek:** Pokud jste v posledních 24–48 hodinách aplikovali na kůži látky zvyšující citlivost (např. retinoidy, kyselinu glykolovou, některé éterické oleje) nebo užíváte fotosenzitivní léky (některá antibiotika, diuretika), terapii vynechte.

- **Závažné onemocnění očí nebo sítnice:** Při těchto stavech je nutná konzultace s očním lékařem před zahájením terapie v obličejí.
- **Akutní horečka nebo infekce:** Terapii neprovádějte, pokud máte horečku nebo akutní infekční onemocnění.
- **Pokud užíváte léky na předpis.**

Bezpečnostní pokyny k užívání LED zařízení pro terapii červeným světlem

⚠ Elektrická bezpečnost – Nejvyšší priorita ⚠

- **Zdroj napájení:** Výhradně používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný výrobcem. Použití nekompatibilního adaptéru (nesprávného napětí, proudu nebo polarity) může zařízení nevratně poškodit a způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- **Kontrola kabelů a adaptéru:** Před každým použitím vizuálně zkontrolujte napájecí kabel a adaptér. Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část kabelu poškozena (prasklá izolace, roztřepené vodiče, deformovaná zástrčka) nebo pokud se adaptér přehřívá, zapáchá nebo vydává neobvyklé zvuky.
- **Umístění:** Zařízení je určeno výhradně pro suché prostory a vnitřní použití. Chraňte jej před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami. Nedávejte na zařízení žádné nádoby s kapalinami. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vysoce hořlavých materiálů.
- **Vedení kabelů:** Kabel nepokládejte na podlahy, kde hrozí poškození. Ani jej neved'te v dosahu dětí nebo domácích zvířat. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- **Přetížení:** Nepřipojujte adaptér k přetížené elektrické zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu.
- **Neponechávejte bez dozoru:** Během používání nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru, zvláště pokud jsou v blízkosti děti nebo domácí zvířata.

⚠ Údržba, skladování a likvidace

- **Údržba a čištění:** Panel vždy čistěte pouze mírně vlhkým, jemným hadříkem. Před čištěním vždy zařízení odpojte od elektrické sítě! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abyste nepoškodili LED diody.
- **Skladování:** Přístroj skladujte na suchém, chladném a nedostupném místě pro děti. Při dlouhodobém uskladnění jej zabalte do původního obalu.

⚠ Likvidace zařízení (dle předpisů WEEE)

- Toto zařízení podléhá specifickým pravidlům pro recyklaci elektroodpadu.
- Nevyhazujte jej do komunálního odpadu!
- Vyřazené elektrické zařízení odevzdejte na místním sběrném dvoře nebo v obchodě s elektronikou, kde mají povinnost jej zpětně odebrat.
- Správná likvidace chrání životní prostředí před škodlivými látkami a umožňuje recyklaci cenných surovin. Informace o nejbližším místě zpětného odběru vám poskytne vaše obec nebo městský úřad.
- Ekologická likvidace je zajištěna prostřednictvím systému Asekol a.s. Sběrná místa naleznete na www.asekol.cz/sberna-mista

⚠ Reklamáce a záruka

Veškeré informace naleznete na shop.redvital.cz/reklamace